


# Extraktionsset für Hüftrevisionen

Schablonengeführtes System  
passend zu **Amistem** (Medacta)

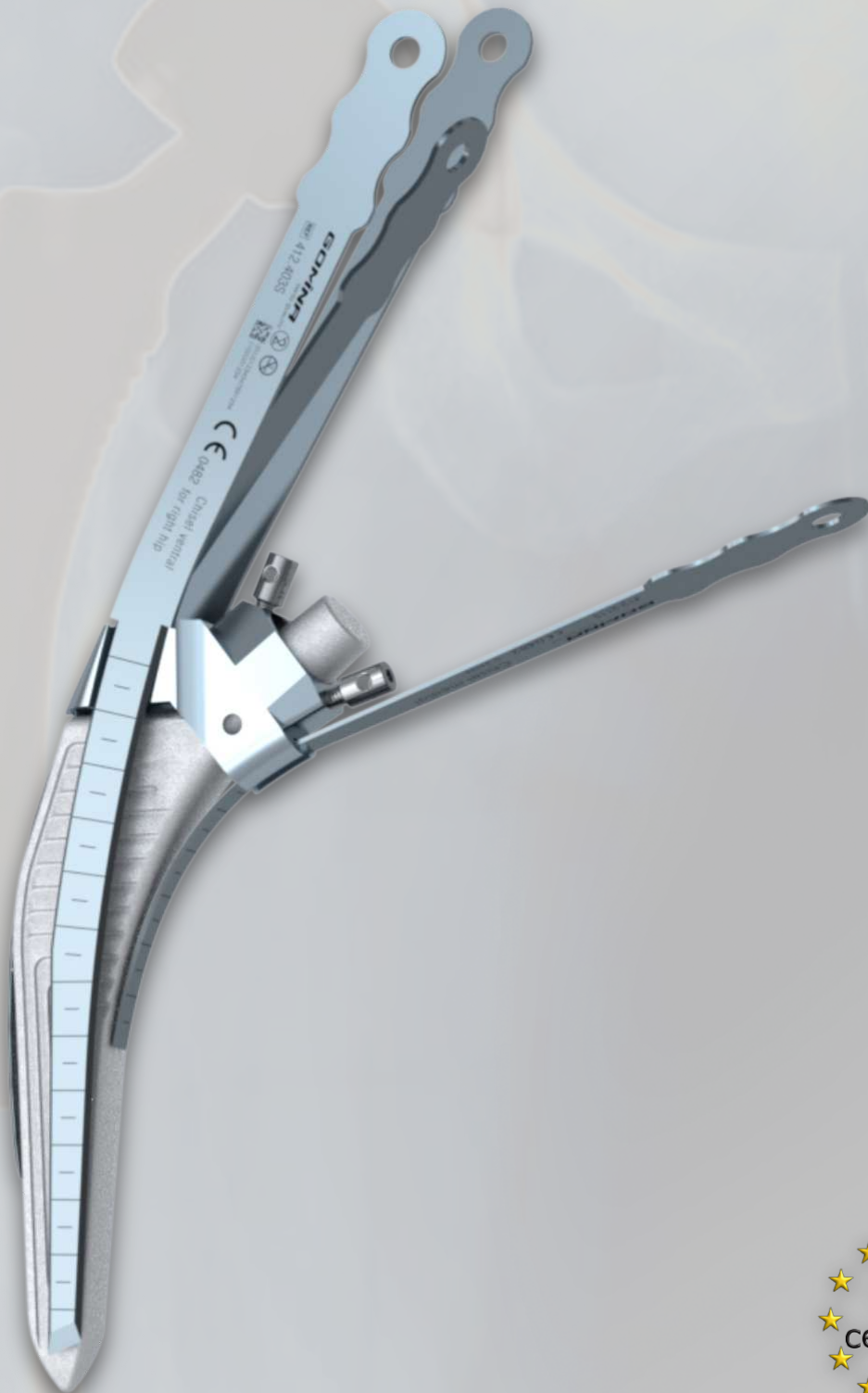

# Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



## Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.

In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert werden.

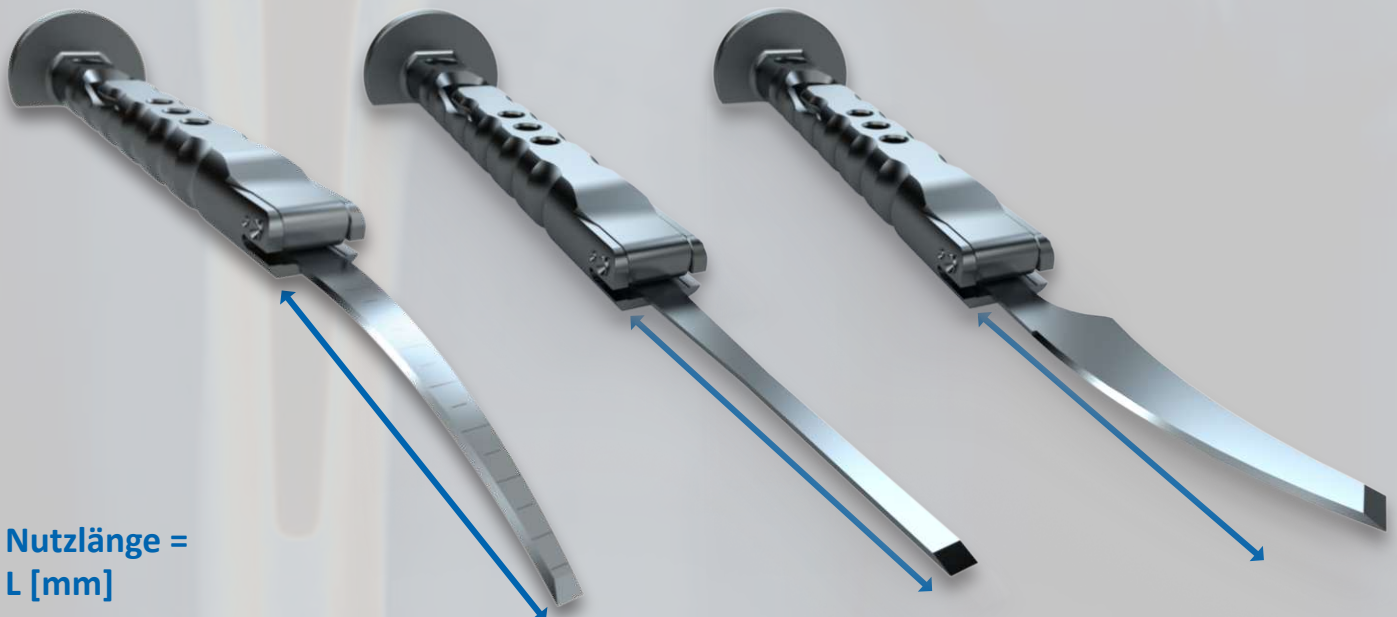


Nutzlänge =  
L [mm]

# Schablone

Führungsrillen

Führungsrillen

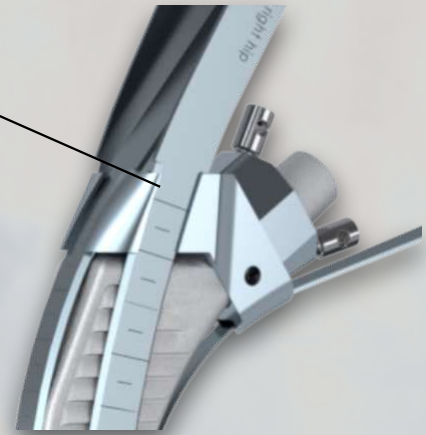


Die schablonengeführten Meissel sind auf die Führungsrillen der entsprechenden Schablonen abgestimmt. Die Meissel werden durch die Führungsrillen geführt bis die Meisselklinge direkten Knochenkontakt hat. Dann können die Meissel mit leichten Hammerschlägen eingetrieben werden.

Die Schablone wird auf den Schaftkonus gesetzt und mit den beiden Fixierschrauben befestigt.



Bei standard Schäften muss zuerst die *mediale* Fixierschraube komplett eingeschraubt werden. Danach die *laterale* Schraube einschrauben bis sie durch Kontakt mit dem Schaft die Schablone fixiert. (Bild 1)


Bei lateralisierten Schäften zuerst die *laterale* Fixierschraube komplett einschrauben. Dann die *mediale* Schraube einschrauben bis sie die Schablone fixiert. (Bild 2)

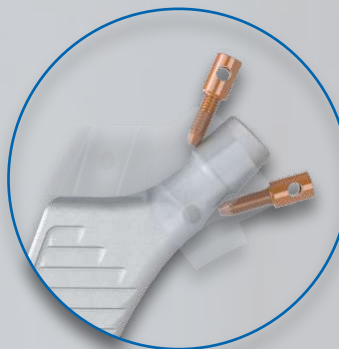

**GOMINA**  
SWISS QUALITY

# Übersicht Meissel mit Schablone

**\*Hinweis: die Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht farblich gekennzeichnet.**

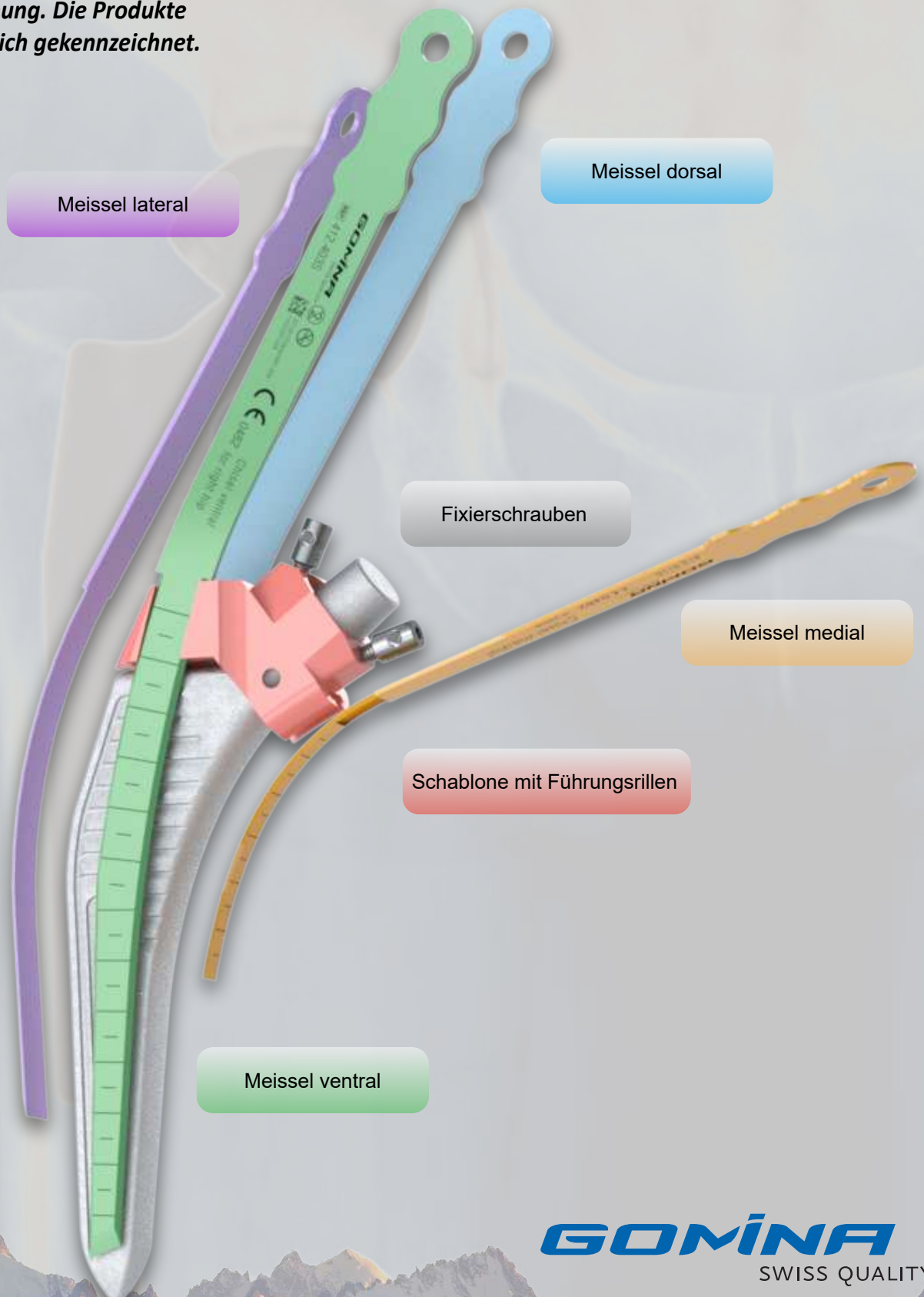

# Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

## Amistem Schaftgrössen 0, 1



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

|                 |                 |       |     |      |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| <b>413.201S</b> | Meissel lateral | 138.0 | 6.0 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|

|                 |                |       |     |      |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| <b>413.211S</b> | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|

|                 |                                     |       |     |      |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>412.401S</b> | Meissel ventral<br>für rechte Hüfte | 170.0 | 4.0 | 1.19 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|

|                 |                                    |       |     |      |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>412.402S</b> | Meissel dorsal<br>für rechte Hüfte | 170.0 | 4.0 | 1.19 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>413.901</b> | Schablone |
|----------------|-----------|



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>400.101</b> | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>400.106</b><br><b>400.111</b> (mit Griff) | Inbusschlüssel |
|----------------------------------------------|----------------|

**GOMINA**  
SWISS QUALITY

# Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

## Amistem Schaftgrössen 2, 3



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

|                 |                 |       |     |      |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| <b>413.202S</b> | Meissel lateral | 137.5 | 7.8 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|

|                 |                |       |     |      |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| <b>413.211S</b> | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|

|                 |                                     |       |     |      |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>412.403S</b> | Meissel ventral<br>für rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|

|                 |                                    |       |     |      |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>412.404S</b> | Meissel dorsal<br>für rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>413.902</b> | Schablone |
|----------------|-----------|



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>400.101</b> | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>400.106</b><br><b>400.111</b> (mit Griff) | Inbusschlüssel |
|----------------------------------------------|----------------|

**GOMINA**  
SWISS QUALITY

# Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

## Amistem Schaftgrössen 4, 5



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

|                 |                 |       |     |      |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| <b>413.203S</b> | Meissel lateral | 143.5 | 9.0 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|

|                 |                |       |     |      |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| <b>413.211S</b> | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|

|                 |                                     |       |     |      |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>412.403S</b> | Meissel ventral<br>für rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|

|                 |                                    |       |     |      |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>412.404S</b> | Meissel dorsal<br>für rechte Hüfte | 170.0 | 7.1 | 1.19 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>413.903</b> | Schablone |
|----------------|-----------|



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>400.101</b> | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>400.106</b><br><b>400.111</b> (mit Griff) | Inbusschlüssel |
|----------------------------------------------|----------------|

**GOMINA**  
SWISS QUALITY

# Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

## Amistem Schaftgrössen 6, 7



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

|                 |                 |       |     |      |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| <b>413.203S</b> | Meissel lateral | 143.5 | 9.0 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|

|                 |                |       |     |      |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| <b>413.211S</b> | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|

|                 |                                     |       |     |      |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>412.409S</b> | Meissel ventral<br>für rechte Hüfte | 200.3 | 6.1 | 1.19 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|

|                 |                                    |       |     |      |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>412.410S</b> | Meissel dorsal<br>für rechte Hüfte | 200.3 | 6.1 | 1.19 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>413.904</b> | Schablone |
|----------------|-----------|



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>400.101</b> | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| <b>400.106</b><br><b>400.111</b> (mit Griff) | Inbusschlüssel |
|----------------------------------------------|----------------|

**GOMINA**  
SWISS QUALITY

# Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

## Amistem Schaftgrössen 8, 9



| Artikelnr. (steril) | Artikelbezeichnung | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------------------|--------|--------|--------|

|                 |                 |       |     |      |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|
| <b>413.203S</b> | Meissel lateral | 143.5 | 9.0 | 1.19 |
|-----------------|-----------------|-------|-----|------|

|                 |                |       |     |      |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|
| <b>413.211S</b> | Meissel medial | 105.2 | 5.8 | 1.19 |
|-----------------|----------------|-------|-----|------|

|                 |                                     |       |     |      |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>412.409S</b> | Meissel ventral<br>für rechte Hüfte | 200.3 | 6.1 | 1.19 |
|-----------------|-------------------------------------|-------|-----|------|

|                 |                                    |       |     |      |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|
| <b>412.410S</b> | Meissel dorsal<br>für rechte Hüfte | 200.3 | 6.1 | 1.19 |
|-----------------|------------------------------------|-------|-----|------|

| Artikelnr. (unsteril) | Artikelbezeichnung |
|-----------------------|--------------------|
|-----------------------|--------------------|



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>413.905</b> | Schablone |
|----------------|-----------|





|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>400.101</b> | Fixierschraube |
|----------------|----------------|



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>400.106</b>             | Inbusschlüssel |
| <b>400.111</b> (mit Griff) |                |

**GOMINA**  
SWISS QUALITY


# Gesamtübersicht Artikelnummern
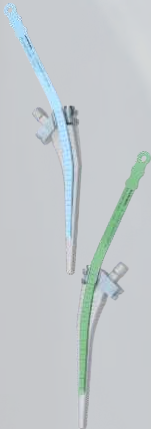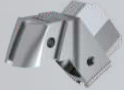
|                                                                                     | Amistem Schaftgrössen | Artikelnr.          | Artikelbezeichnung              | L [mm] | B [mm] | D [mm] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
|    | Alle Grössen          | 400.001             | Handgriff inkl. Ausschlagbolzen |        |        |        |
|                                                                                     | Alle Grössen          | 400.100             | Ausschlagbolzen (Ersatzteil)    |        |        |        |
|    | 0/1                   | 413.201S            | Meissel lateral                 | 138.0  | 6.0    | 1.19   |
|                                                                                     | 2/3                   | 413.202S            | Meissel lateral                 | 137.5  | 7.8    | 1.19   |
|                                                                                     | 4/5/6/7/8/9           | 413.203S            | Meissel lateral                 | 143.5  | 9.0    | 1.19   |
|   | Alle Grössen          | 413.211S            | Meissel medial                  | 105.2  | 5.8    | 1.19   |
|  | 0/1                   | 412.401S            | Meissel ventral rechte Hüfte    | 170.0  | 4.0    | 1.19   |
|                                                                                     | 0/1                   | 412.402S            | Meissel dorsal rechte Hüfte     | 170.0  | 4.0    | 1.19   |
|                                                                                     | 2/3/4/5               | 412.403S            | Meissel ventral rechte Hüfte    | 170.0  | 7.1    | 1.19   |
|                                                                                     | 2/3/4/5               | 412.404S            | Meissel dorsal rechte Hüfte     | 170.0  | 7.1    | 1.19   |
|                                                                                     | 6/7/8/9               | 412.409S            | Meissel ventral rechte Hüfte    | 200.3  | 6.1    | 1.19   |
|                                                                                     | 6/7/8/9               | 412.410S            | Meissel dorsal rechte Hüfte     | 200.3  | 6.1    | 1.19   |
|  | 0/1                   | 413.901             | Schablone                       |        |        |        |
|                                                                                     | 2/3                   | 413.902             | Schablone                       |        |        |        |
|                                                                                     | 4/5                   | 413.903             | Schablone                       |        |        |        |
|                                                                                     | 6/7                   | 413.904             | Schablone                       |        |        |        |
|                                                                                     | 8/9                   | 413.905             | Schablone                       |        |        |        |
|  | Alle Grössen          | 400.101             | Fixierschraube                  |        |        |        |
|                                                                                     | Alle Grössen          | 400.106             | Inbusschlüssel                  |        |        |        |
|                                                                                     |                       | 400.111 (mit Griff) | Inbusschlüssel                  |        |        |        |

# Kontakt



Gomina AG  
Raiftstrasse 4  
3989 Niederwald, Schweiz  
Tel. +41 27 970 12 70  
Fax +41 27 970 12 75  
[www.gomina.ch](http://www.gomina.ch)  
[sales@gomina.ch](mailto:sales@gomina.ch)

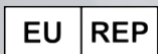

GOMINA Deutschland GmbH  
Ludwig-Vierling-Strasse 7  
89233 Neu-Ulm, Deutschland  
[info@gomina.de](mailto:info@gomina.de)

Version 2026-03  
Zuletzt aktualisiert: 16.03.2026