

Extraktionsset für Hüftrevisionen

Schablonengeführtes System

passend zu **Corail®** (DePuy Synthes)



Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.

In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert werden.


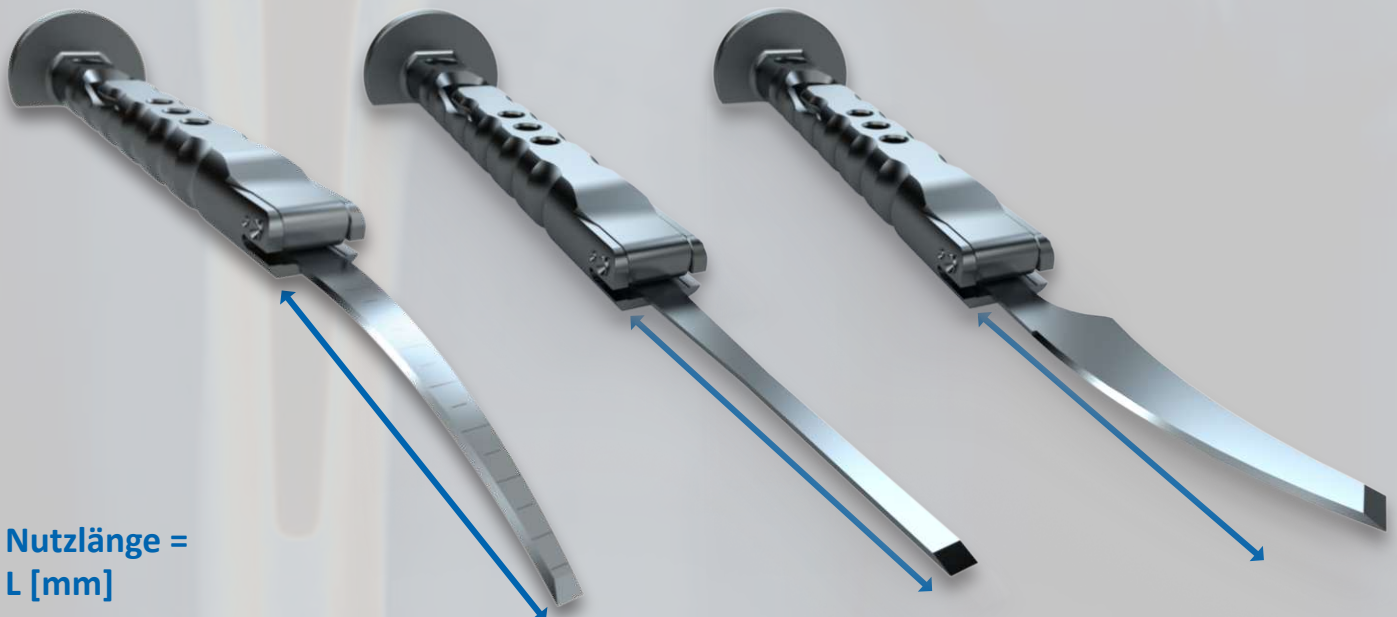


Nutzlänge =
L [mm]

Schablone

Führungsschlitze

Führungsrillen

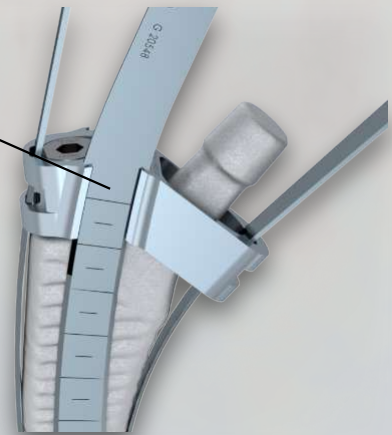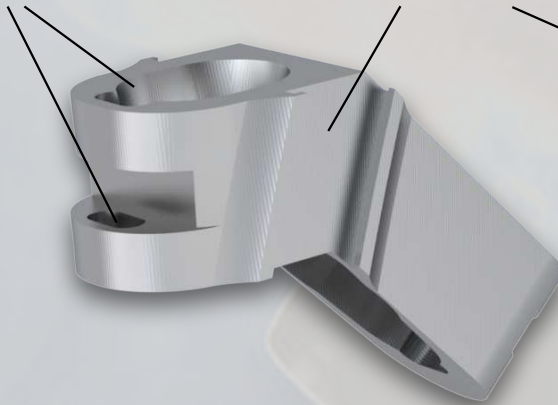

Die schablonengeführten Meissel sind auf die Führungsschlitze der entsprechenden Schablonen abgestimmt. Die Meissel werden durch beide Führungsschlitze (bzw. Rillen) geführt bis die Meisselklinge direkten Knochenkontakt hat. Dann können die Meissel mit leichten Hammerschlägen eingetrieben werden.


Die Schablone wird auf den Schaftkonus gesetzt und mit der Fixierschraube befestigt.



Die Schablone muss in lateral-medialer Richtung korrekt auf dem Schaft positioniert werden, bevor sie mithilfe der Schraube fixiert wird. Als Referenz wird der laterale Führungsschlitz verwendet.

Übersicht Meissel mit Schablone


***Hinweis: die Farben dienen nur zur Veranschaulichung. Die Produkte sind nicht farblich gekennzeichnet.**

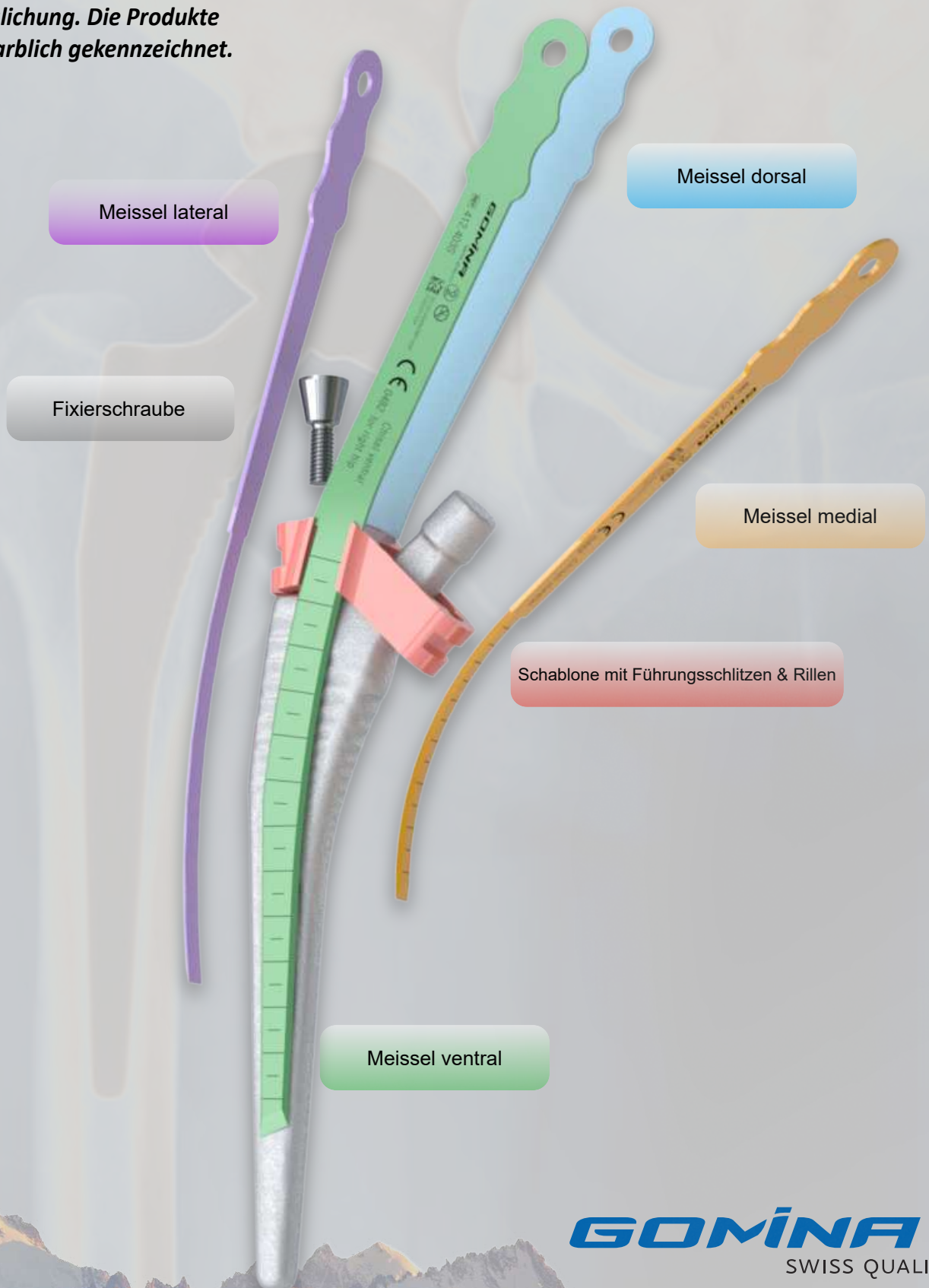

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse


Corail® Schaftgrössen **08, 09, 10**

(für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)

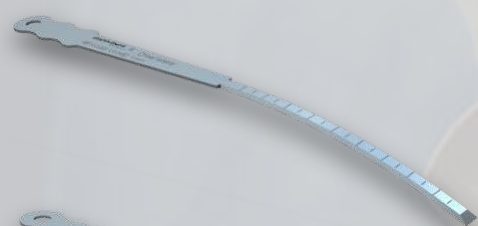


Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

412.201S	Meissel lateral	133.0	4.8	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

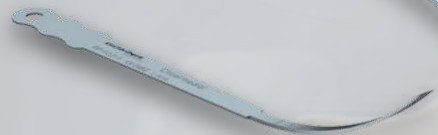


412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

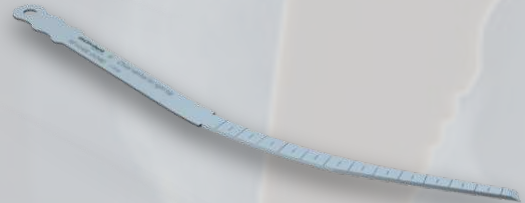

412.401S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.402S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

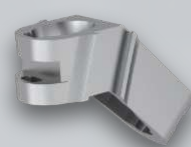

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------

412.901	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
-----------------------	----------------

400.107 (lang)

400.112 (mit Griff)



GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **11, 12, 13**

(für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------


412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

412.403S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

412.404S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------

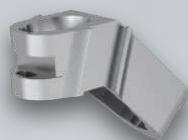

412.903	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	
400.112 (mit Griff)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen 14, 15, 16

(für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

412.405S	Meissel ventral für rechte Hüfte	215.3	7.4	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

412.406S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	215.3	7.4	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.905	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	
400.112 (mit Griff)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **18, 20**

(für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------


412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

412.407S	Meissel ventral für rechte Hüfte	233.5	9.7	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

412.408S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	233.5	9.7	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------

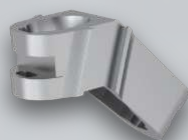

412.907	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------




400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	
400.112 (mit Griff)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse


Corail® Schaftgrössen **08, 09, 10**

(für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)

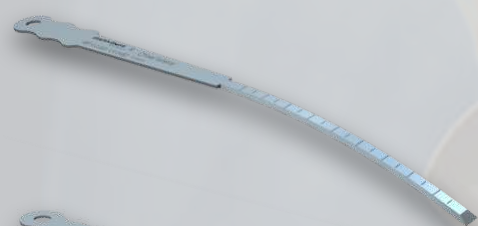

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

412.201S	Meissel lateral	133.0	4.8	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

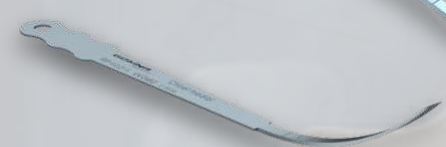


412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.401S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.402S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

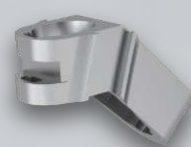

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------

412.909	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104(kurz)



400.107(lang)

Inbusschlüssel


400.112(mit Griff)

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse


Corail® Schaftgrössen **11, 12, 13**

(für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)

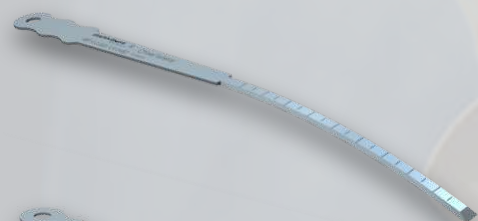

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

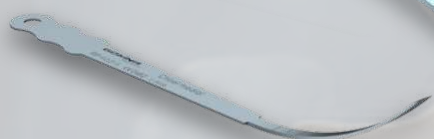


412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.403S	Meissel ventral für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.404S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

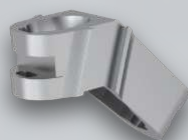

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------

412.910	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------




400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	
400.112 (mit Griff)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse


Corail® Schaftgrössen **14, 15, 16**

(für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)

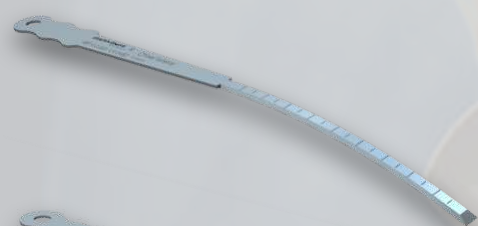

Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

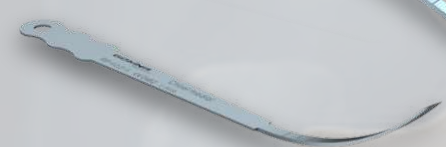

412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------



412.405S	Meissel ventral für rechte Hüfte	215.3	7.4	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------



412.406S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	215.3	7.4	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------



Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------

412.911	Schablone
----------------	-----------



400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	
400.112 (mit Griff)	

GOMINA
SWISS QUALITY

Indizierte Artikelnr. nach Schaftgrösse

Corail® Schaftgrössen **18, 20**

(für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)



Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
---------------------	--------------------	--------	--------	--------

412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
-----------------	-----------------	-------	-----	------

412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
-----------------	----------------	-------	-----	------

412.407S	Meissel ventral für rechte Hüfte	233.5	9.7	1.19
-----------------	-------------------------------------	-------	-----	------

412.408S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	233.5	9.7	1.19
-----------------	------------------------------------	-------	-----	------

Artikelnr. (unsteril)	Artikelbezeichnung
-----------------------	--------------------



412.912	Schablone
----------------	-----------







400.102	Fixierschraube
----------------	----------------



400.104 (kurz)	Inbusschlüssel
400.107 (lang)	
400.112 (mit Griff)	

GOMINA
SWISS QUALITY


Gesamtübersicht Artikelnummern

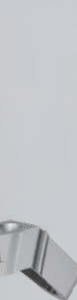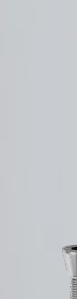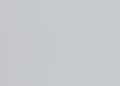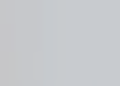	Corail® Schaftgrössen	Artikelnr.	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
	Alle Grössen	400.001	Handgriff inkl. Ausschlagbolzen			
	Alle Grössen	400.100	Ausschlagbolzen (Ersatzteil)			
	08/09/10	412.201S	Meissel lateral	133.0	4.8	1.19
	11/12/13/14/15/16/18/20	412.202S	Meissel lateral	138.0	6.0	1.19
	Alle Grössen	412.211S	Meissel medial	105.2	5.8	1.19
	08/09/10	412.401S	Meissel ventral rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
	08/09/10	412.402S	Meissel dorsal rechte Hüfte	170.0	4.0	1.19
	11/12/13	412.403S	Meissel ventral rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
	11/12/13	412.404S	Meissel dorsal rechte Hüfte	170.0	7.1	1.19
	14/15/16	412.405S	Meissel ventral rechte Hüfte	215.3	7.4	1.19
	14/15/16	412.406S	Meissel dorsal rechte Hüfte	215.3	7.4	1.19
	18/20	412.407S	Meissel ventral rechte Hüfte	233.5	9.7	1.19
	18/20	412.408S	Meissel dorsal rechte Hüfte	233.5	9.7	1.19
	08/09/10	412.901	Schablone (für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)			
	11/12/13	412.903	Schablone (für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)			
	14/15/16	412.905	Schablone (für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)			
	18/20	412.907	Schablone (für Corail 135° STD, 125° STD, 135°SN, alle ohne Kragen)			
	08/09/10	412.909	Schablone (für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)			
	11/12/13	412.903	Schablone (für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)			
	14/15/16	412.905	Schablone (für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)			
	18/20	412.907	Schablone (für Corail High Offset 135° KHO, 125° KLA, alle ohne Kragen)			
	Alle Grössen	400.102	Fixierschraube			
	Alle Grössen	400.104 (kurz) 400.107 (lang) 400.112 (mit Griff)	Inbusschlüssel			

Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Tel. +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch

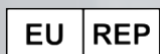

GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Deutschland
info@gomina.de

Version 2026-03
Zuletzt aktualisiert: 16.03.2026