

Extraktionsset für Hüft- und Knierevisionen

Universalsystem



Handgriff und Ausschlagbolzen


Der Ausschlagbolzen kann an der Ober- oder Unterseite des Handgriffs befestigt werden.



Nutzlänge der Meissel

Der Handgriff mit Schnellspannvorrichtung weist drei Fixierungspositionen für die Meissel auf.


In der Einspannposition 2 wird die Nutzlänge des Meissels gegenüber der Position 1 um 15mm und in der Position 3 um weitere 15mm verlängert. Insgesamt kann die Nutzlänge von der Position 1 bis zur Position 3 um 30 mm verlängert werden.

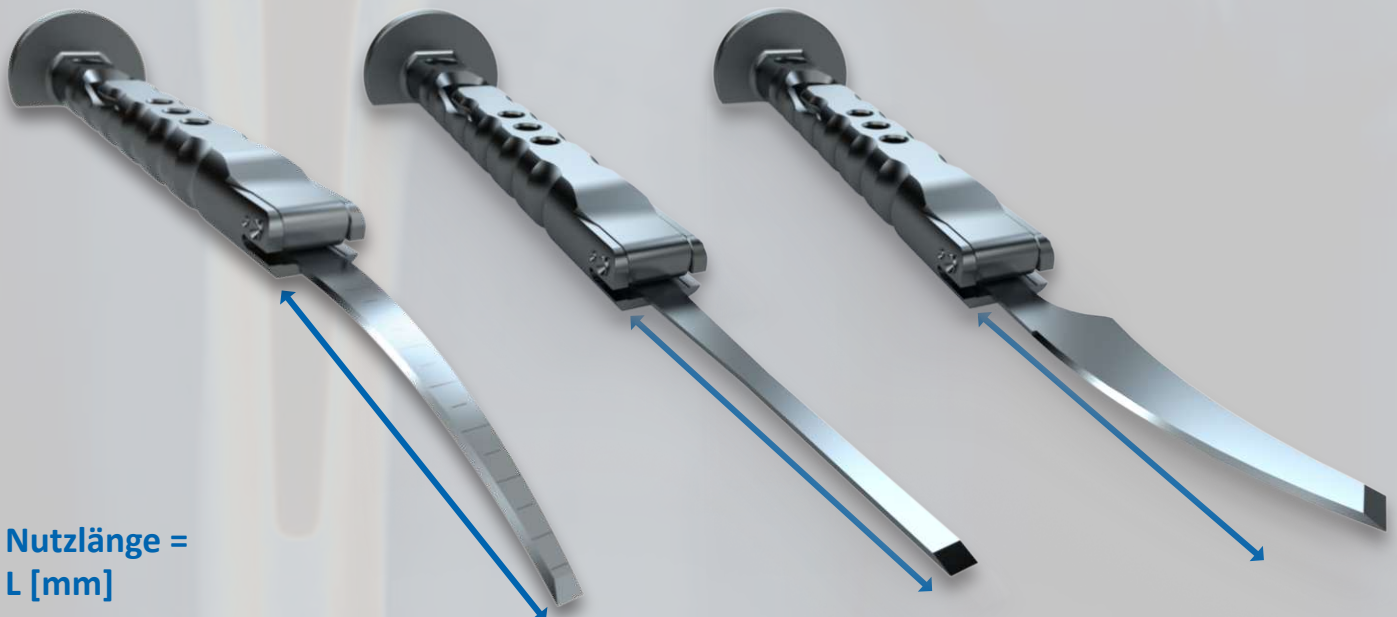

Nutzlänge =
L [mm]

Universal Meissel

Das Design und die Dimensionen der Meissel passen zu den gängigen Hüftschäften.
Als Single-Use Instrumente werden die Meissel steril verpackt geliefert.

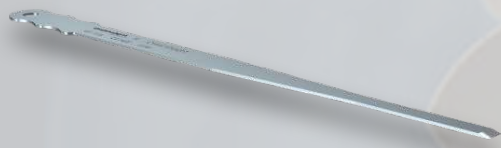**401.101S**

Meissel gerade

143.0

6.0

1.19

**401.102S**

Meissel gerade

83.0

6.0

1.19

**401.201S**Meissel lateral
gebogen

116.0

5.8

1.19

**401.203S**Meissel medial
gebogen

114.5

5.4

1.19

**401.403S**Meissel ventral
für rechte Hüfte

118.4

9.5

1.19

**401.404S**Meissel dorsal
für rechte Hüfte

118.4

9.5

1.19

Universal Meissel

Das Design und die Dimensionen der Meissel passen zu den gängigen unikondylären Knie-Systemen. Als Single-Use Instrumente werden die Meissel steril verpackt geliefert.

	Artikelnr. (steril)	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
	401.401S	Meissel gerade	100.0	5.0	1.19
	401.402S	Meissel gerade	100.0	5.0	1.19
	401.103S	Meissel gerade	100.0	5.0	1.19
	401.104S	Meissel gerade	100.0	10.0	1.19
	401.105S	Meissel gerade	100.0	15.0	1.19
	401.106S	Meissel gerade	100.0	20.0	1.19
	401.107S	Meissel gerade	100.0	20.0	1.19

Gesamtübersicht Artikelnummern




Artikelnr.	Artikelbezeichnung	L [mm]	B [mm]	D [mm]
400.001	Handgriff inkl. Ausschlagbolzen			
400.100	Ausschlagbolzen (Ersatzteil)			
401.101S	Meissel gerade	143.0	6.0	1.19
401.102S	Meissel gerade	83.0	6.0	1.19
401.201S	Meissel lateral gebogen	116.0	5.8	1.19
401.203S	Meissel medial gebogen	114.5	5.4	1.19
401.403S	Meissel ventral für rechte Hüfte	118.4	9.5	1.19
401.404S	Meissel dorsal für rechte Hüfte	118.4	9.5	1.19
*geeignet für Knierevisionen				
401.401S	Meissel gerade	100.0	5.0	1.19
401.402S	Meissel gerade	100.0	5.0	1.19
401.103S	Meissel gerade	100.0	5.0	1.19
401.104S	Meissel gerade	100.0	10.0	1.19
401.105S	Meissel gerade	100.0	15.0	1.19
401.106S	Meissel gerade	100.0	20.0	1.19
401.107S	Meissel gerade	100.0	20.0	1.19

Kontakt



Gomina AG
Raiftstrasse 4
3989 Niederwald, Schweiz
Tel. +41 27 970 12 70
Fax +41 27 970 12 75
www.gomina.ch
sales@gomina.ch

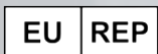

GOMINA Deutschland GmbH
Ludwig-Vierling-Strasse 7
89233 Neu-Ulm, Deutschland
info@gomina.de

Version 2025-09
Zuletzt aktualisiert: 23.09.2025